

주의사항

본 제품을 올바르게 사용하기 위해 다음을 참조하시고, 다음 안전 지침을 준수하십시오.

- 이 제품은 방수가 되지 않습니다. 물에 담그지 마십시오.
욕조, 샤워 트레이, 세면대 또는 기타 물을 담은 용기와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
제품과 전원 어댑터는 건조한 상태를 유지해 주세요.
- 제품을 사용하기 전에 물이나 다른 액체가 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해 건조한 손으로 제품을 사용해 주세요. 피부 부위를 과도하게 흡착하면 얼굴이 빨개질 수 있습니다. 과도한 사용은 금해 주세요.
- 같은 부위에 3초 이상 사용하지 않도록 하고, 사용 시간은 5분을 초과 하지 마세요.
- 상처부위나 입, 눈, 입 등 피부가 얇은 부위에는 사용하지 마십시오.
- 상처가 있는 피부 부위에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 상처, 성형수술을 받은 부위, 피부의 염증, 가려움, 붉은 부분에는 사용하지 마십시오.
- 불편하시면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 제품을 장시간 계속 사용 시 발열이 발생할 수 있으며, 이는 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.
- 제품 사용 후 피부가 붉어질 수 있으며, 이는 정상이며 1시간 이내에 사라집니다.
- 피부 문제에 노출되어 있는 경우, 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하고, 사고와 부상의 원인이 될 수 있으니 어린이가 사용하지 못하게 하십시오.
- 제품이 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.

제품 구조

◎ 본체



제품소개


◎ 제품 설명

내시경 피지흡입기는 진공(압축)기술을 이용하여 4개의 전용 흡입 노즐로 블랙헤드, 여드름, 피지 등을 효과적으로 제거해주며, 모공을 깨끗하게 청소하여 더욱 매끈한 피부를 유지 할 수 있습니다.
또한 200만 화소의 카메라가 내장 되어 피부를 직관적으로 모니터링 할 수 있어 더욱 신뢰가 가는 제품입니다.



제품기능

- 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 렌즈가 커지면서 전원이 켜집니다.
- 전원을 켜 후 버튼을 짧게 눌러 소프트/보통/스트롱/대기 모드 중에서 선택하여 사용하시면 됩니다.
- 배터리가 저전력 일 경우 배터리 표시등이 빨간색으로 켜지고 천천히 깜박입니다.
- 충전 시 빨간색 배터리 표시등이 켜지고, 완전히 충전되면 초록색 표시등이 켜집니다.
- 각 모드는 약 5분간 작동하며, 이후 대기 모드로 전환됩니다. 5분 후 작동되지 않으면 자동으로 종료됩니다.
- 모든 작동 모드에서 전원 버튼을 2초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

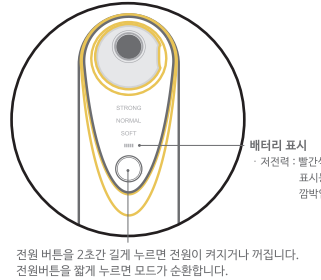

작동 순서

◎ APP 다운로드 및 설치

사용 설명서의 QR 코드를 모바일로 스캔 합니다.
클릭하여 프로그램을 다운로드한 다음 중지합니다.
(위젯으로 QR코드를 스캔하는 경우 수동으로 전환하여 열어야 합니다.)
프로그램 다운로드를 중국어로 되어 있는 2번 항목을 선택해 주세요.
(실제 사용자 시 이를 내는 한글로 표시 됩니다.)

[IOS app download](#)

[点击下载app\(中国大陆用户\)](#)

[download app \(google play\)](#)




IOS 및 Android 시스템 선택

안심하고 설치 하셔도 됩니다.

케어방법


- ① APP를 다운로드하여 설치합니다.
(특정 단계는 APP 소프트웨어 다운로드 절차를 확인하십시오)
- ② 기기를 모바일 APP와 연결합니다.
(자세한 연결방법은 APP 기능 설명을 확인하십시오)
- ③ 기초적인 세안 후 얼굴 따뜻한 물수건으로 모공을 넓히거나 블랙헤드 추출용 크림 등을 사용 후 피지를 제거합니다.
- ④ 적절한 흡입 노즐을 사용하여 제품 상단에 설치하고 손바닥이나 팔뚝에 흡착을 시험합니다.
- ⑤ 피부 상태에 따라 적절한 흡입력을 선택합니다.
(Sooth/Normal/STRONG)
- ⑥ 흡입노즐이 피부에 부착되어 있고 틈이 없는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 진공 음압이 형성되지 않습니다.
- ⑦ 제품을 사용할 때는 계속 움직여야 하며, 제품을 너무 오랫동안 한 위치에 두지 마시고, 같은 부위에는 3초 이상 사용하지 마세요. 각 작동 시간은 5분을 초과하지 않으며 대기 모드에서 5분 이내에 제품이 작동하지 않으면 자동으로 종료됩니다.
- ⑧ 사용 후 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 끄고, 피부를 얼음팩질 또는 세럼으로 피부를 진정시킬 수 있습니다.
일주일에 1~2회 정도 사용할 것을 추천 드립니다.

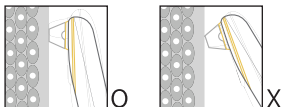

APP 기능 설명

APP를 통해 이 제품의 카메라를 연결하면, 보다 편하게 눈으로 직접 확인 하면서 모공을 청소할 수 있습니다.

- ① 기기의 전원을 켜고 휴대폰에서 WIFI를 설정합니다.
WIFI (JS-LBQ-H****) 에 연결 합니다.
- ② APP를 열고 홈 페이지에 들어갑니다. (장치가 있는 경우) 연결이 되지 않으면 APP에서 즉시 작동 지침을 표시합니다.
- ③ 'Js' 를 클릭하여 카메라에서 전송된 이미지를 확인합니다.
- ④ 사용자 얼굴 피부 상태에 따라 위치를 적절하게 조절하여 사용합니다.
- ⑤ '비디오'를 클릭하여 피지흡입기에 의해 전송된 이미지를 저장할 수 있습니다.
- ⑥ '사진 찍기'를 클릭하여 피지흡입기 장치의 카메라가 전송한 이미지를 사진 형식으로 휴대폰에 저장합니다.
- ⑦ 사용 후 바로 백그라운드에서 앱을 닫습니다.

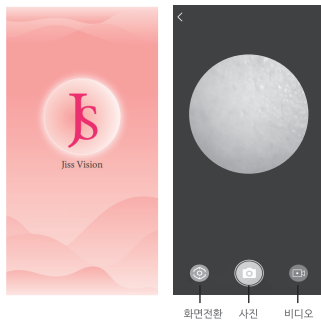

충전 및 표시등

- ① 처음 사용하기 전에 기계를 완전히 충전하십시오.
- ② DC5V/1A의 어댑터를 사용해 주십시오.
- ③ 충전 중에는 빨간색 배터리 표시등이 켜집니다.
- ④ 완전히 충전되면 초록색 배터리 표시등이 켜집니다.
- ⑤ 저전력이 발생하면 빨간색 배터리 표시등이 깜박입니다.
완전히 충전한 후 사용하십시오.

※ 10초 충전 후에도 연결이 시작되지 않은 경우, USB 케이블이 연결되어 있는지, 전원 공급이 정상인지 확인 하십시오.

※ USB 케이블은 반드시 동봉된 케이블을 사용해 주십시오.

제품 사양

- 제품 이름 : 내시경 피지흡입기
- 제품 모델 : H02
- 정격 입력 : DC 5V / 1A
- 정격 전력 : 3W
- 배터리 용량 : 850mAh/3.7V
- 제품 크기 : 40 x 47.5 x 163.9 (mm)
- 실행 표준 : GB 476.1-2005

FAQ

Q: 왜 블랙헤드는 잘 나오지 않을까요?

A: 1. 정상적인 경우 모공이 닫혀 있습니다. 제품 사용 전 따뜻한 물수건으로 모공을 확장 시키거나 블랙헤드 추출크림을 사용하면 보다 부드럽고 간단하게 압출할 수 있습니다.
2. 적절한 노즐을 사용하여 피부 상태에 따라 적절한 흡입력을 선택합니다.

Q: 피지 흡입기 사용 후 왜 사용 부위가 빨간색으로 되나요?

A: 진공 부압의 흡입력으로 인해 추출 후 피부가 약간 홍조를 띠게 되는데, 정상이며 1시간 이내에 희미하게 사라집니다. 제품을 사용할 때는 같은 부위에 3초 이상 방치하지 않는 것이 좋습니다.
제품 사용 후 얼음 팩질하거나 세럼팩을 추가로 사용할 수 있습니다.

Q: 적절한 단계를 선택하는 방법은 무엇입니까?

A: 제품을 사용하기 전에 손으로 흡입력을 확인한 후 점차 적정 수준으로 조절하여 주십시오.

Q: 사용하는 동안 왜 아픈가요?

1. 흡입력이 강하지 않은 단계부터 사용하면서 고객에게 맞는 단계를 골라주십시오
2. 더 작은 흡입노즐을 선택하십시오.
3. 제품을 한 부분에 3초 이상 머물지 말고, 계속 움직여서 사용해 주십시오.
4. 각 단계의 사용은 5분을 초과하지 마십시오.

Q: 사용 빈도는 어떻게 되나요?

A: 민감성 피부와 건성 피부는 일주일에 한 번, 지성 피부와 혼합성 피부는 일주일에 두 번 사용해 주십시오.

Q: 완전히 충전된 후에는 얼마나 작동할 수 있습니까?

A: 모바일 연결 시 90분, 모바일 미연결 시 150분 동안 연속으로 사용할 수 있습니다.

Q: 모바일 앱을 연결할 수 없는 이유는 무엇입니까?

- A: 1. 피지흡입기 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 휴대폰의 WIFI를 켜진 후 기기의 WIFI를 연결 해주십시오.

Q: 앱이 왜 갑자기 꺼질까요?

A: 제품의 배터리가 부족할 경우 앱이 꺼질 수 있으니 제품이 완전히 충전되면 다시 시도하십시오.

Q: 기기가 응답하지 않는 이유는 무엇입니까?

A: 기기가 보호 상태로 전환되었을 수 있습니다. 버튼을 8초간 길게 눌러 기기를 다시 시작하십시오.

유해 물질

부품 명	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	구리 크롬 (Cr(VI))	폴리브로마화비페닐 (PBB)	폴리브로디메틸 에테일 에테르 (PBDE)
플라스틱 부품	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
공기 필터	○	○	○	○	○	○
배터리	○	○	○	○	○	○
USB	○	○	○	○	○	○
열원 재료	○	○	○	○	○	○
포장재료	○	○	○	○	○	○

이 시트는 SJ/T 11364에 따라 작성되었습니다.
A: 모든 물질 유해물질의 함량을 나타냅니다.
부품의 재료가 GB/T 26572에 명시된 한계 미만이면 됩니다.
X: 하나 이상의 유해 물질 함량을 나타냅니다.
부품의 동종 소재가 GB/T 26572에 명시된 제한 요구사항을 초과합니다.
참고: 위험 및 독성 물질 또는 성분이 포함된 부품은 글로벌 수준의 제약으로 인해 고제가 불가능합니다.

청소 및 유지 관리

- ① 제품이 꺼져 있는지 확인하고 감전되지 않도록 기기를 세척하지 마십시오.
- ② 흡입노즐을 세척할 때 먼저 흡입노즐을 제품에서 제거한 후 따뜻한 물로 노즐을 세척하십시오.
- ③ 본체는 방수 처리가 되어 있지 않아 물 티슈나 젖은 천으로 깨끗하게 닦아주세요. 물로 직접 세척하지 마십시오.
- ④ 제품 카메라 렌즈는 연봉으로 닦아야 하며, 단단한 물체로 렌즈를 만지지 마십시오.
- ⑤ 부식성 용액을 사용하여 닦지 마십시오.
- ⑥ 일반 건조한 환경에 보관하십시오.
- ⑦ 제품을 개인적으로 분해하지 마십시오. 결함이 있거나 제품을 사용할 수 없는 경우에는 사용하지 말고 구매처에 문의하십시오.



설명서에 사용된 그림은 참조용으로만 사용됩니다.
실제 제품을 참고하시기 바랍니다.